


LC06 Chimie analytique, quantitative et fiabilité




Dosage par étalonnage : établir la concentration en colorant bleu E131 dans le curaçaο


Tube à essai	1	2	3	4	5
Concentration en E131	$2 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$	$4 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$	$6 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$	$8 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$	$10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

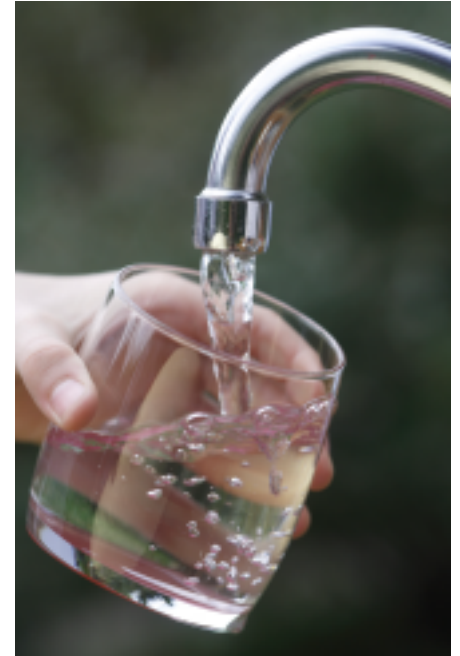


Spectrophotométrie

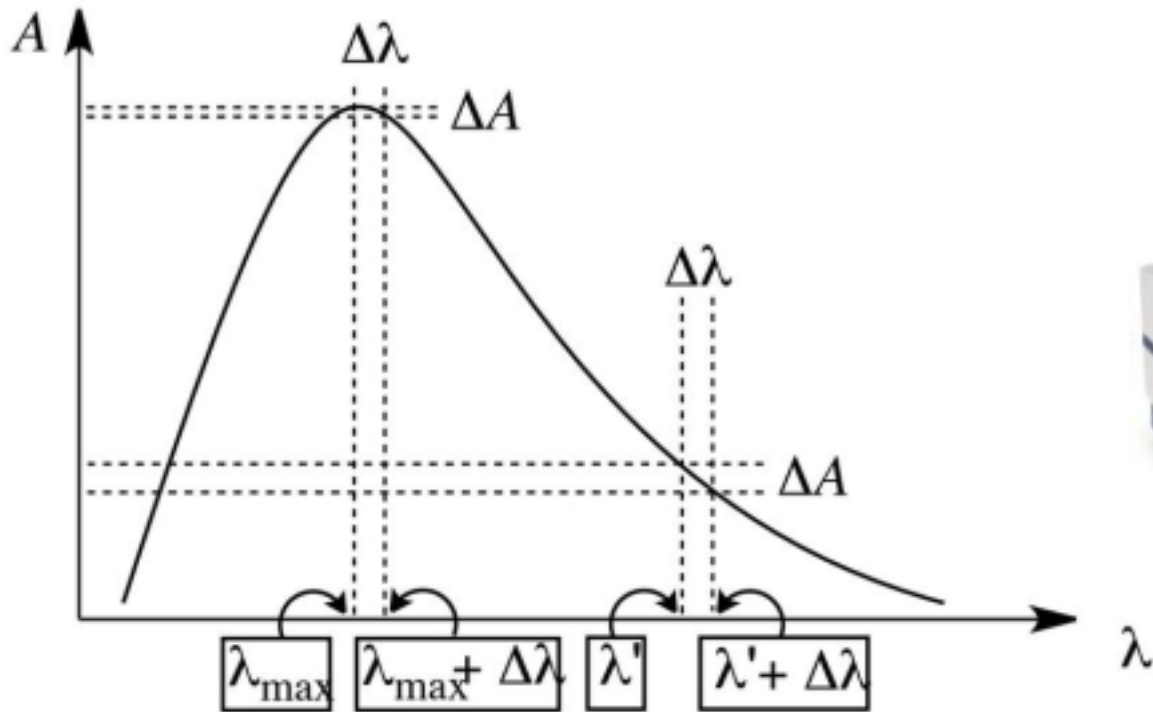



Cellule conductimétrique

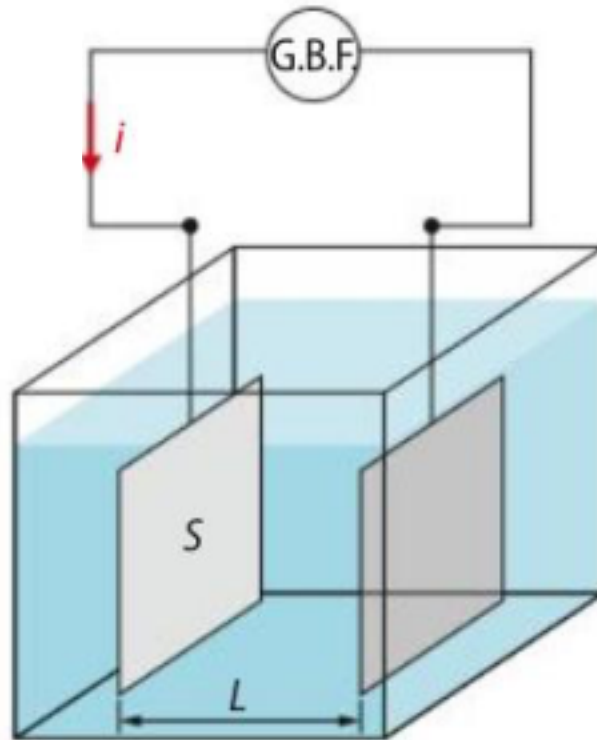

Titrage pH-métrique de l'acide éthanoïque dans le vinaigre

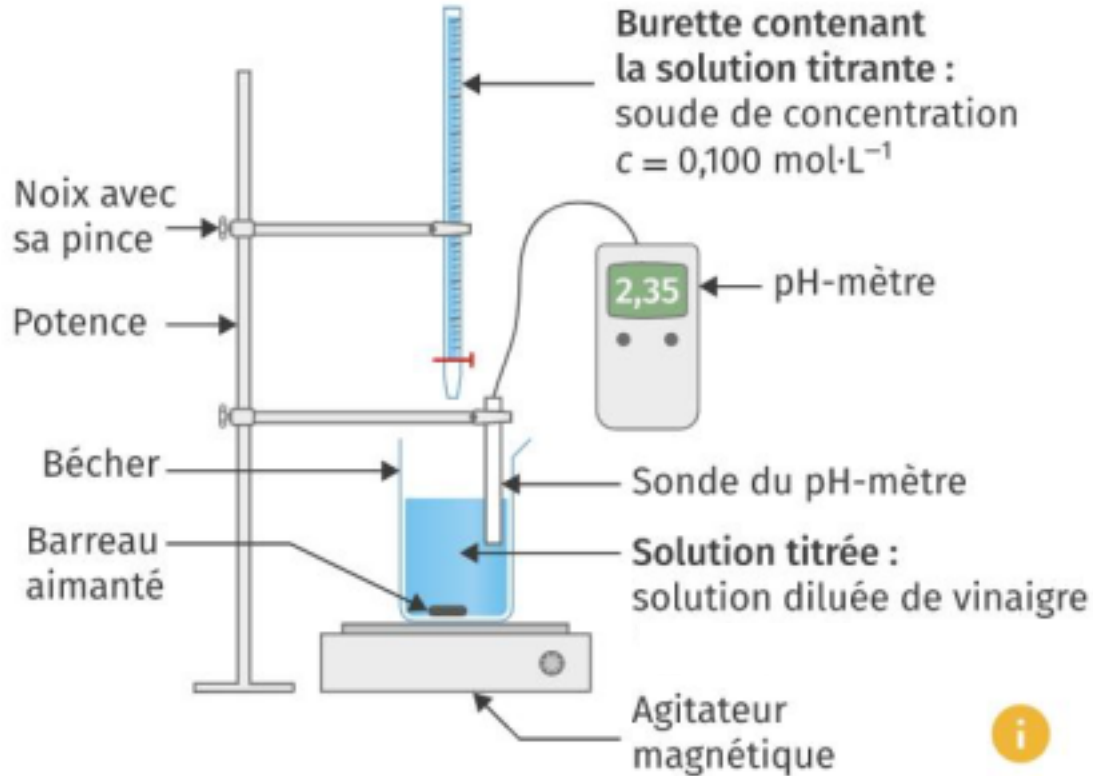

Titrage pH-métrique : équivalence

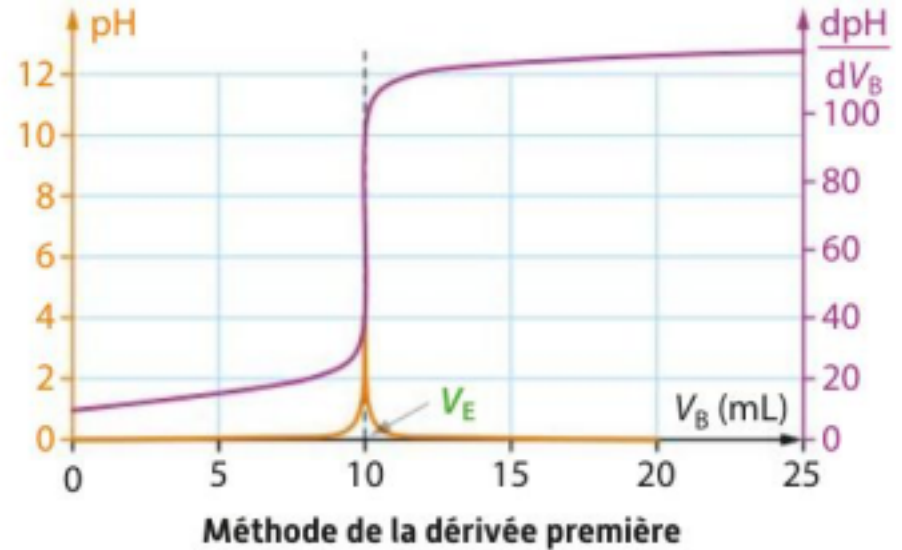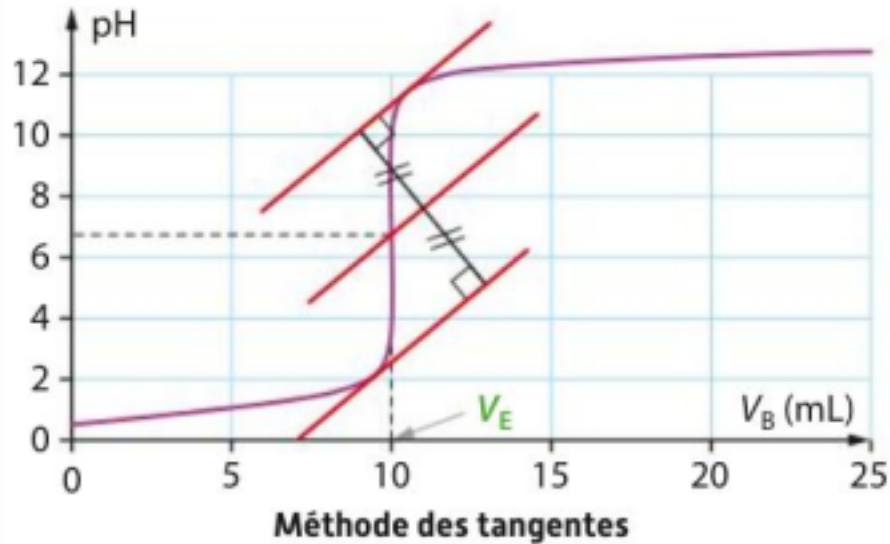

Titrage conductimétrique du chlorure de sodium dans le sérum physiologique

	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
[Na ⁺]	Constante	Constante
[Cl ⁻]	Diminue	0
[Ag ⁺]	0	Augmente
[NO ₃ ⁻]	Augmente	Augmente

- Avant l'équivalence :

$$\sigma = \lambda_{\text{Na}^+}^0 [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{Cl}^-}^0 [\text{Cl}^-] + \lambda_{\text{NO}_3^-}^0 [\text{NO}_3^-] \text{ et } \lambda_{\text{Cl}^-}^0 > \lambda_{\text{NO}_3^-}^0$$

- Après l'équivalence :

$$\sigma = \lambda_{\text{Na}^+}^0 [\text{Na}^+] + \lambda_{\text{Ag}^+}^0 [\text{Ag}^+] + \lambda_{\text{NO}_3^-}^0 [\text{NO}_3^-]$$

